


HERO Shaper[®] : Protocole / Protocol

Séquence jaune cas complexes / *Yellow sequence complex cases*


① N° 20-6%




② N° 20-4%

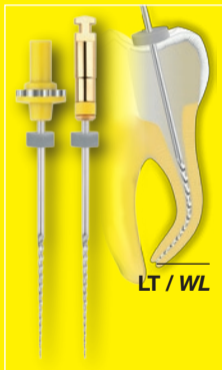

③ N° 25-4%

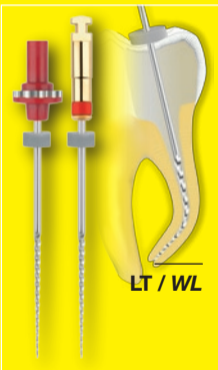

④ N° 30-4%

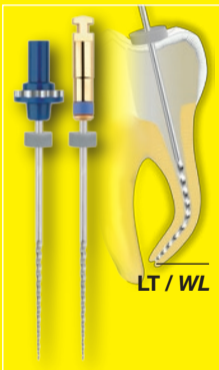

Vitesse 300 à 600 tr/min - Speed 300 to 600 rpm



www.micro-mega.com



HERO Shaper[®] : Protocole / Protocol



Séquence rouge cas intermédiaires / *Red sequence intermediate cases*

- 1 N° 25-6% 2 N° 25-4% 3 N° 30-4%

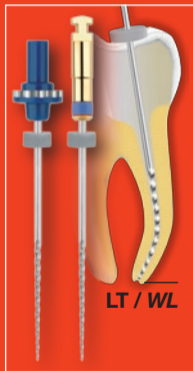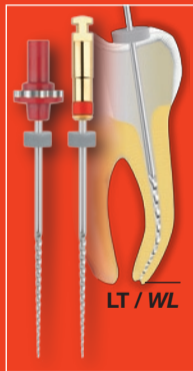

Séquence bleue cas simples / *Blue sequence easy cases*

- 1 N° 30-6% 2 N° 30-4%

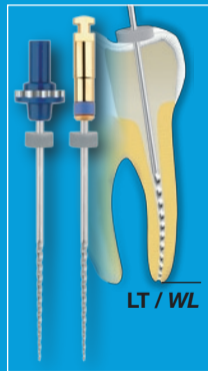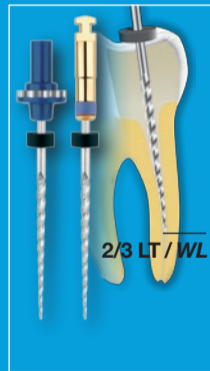

Vitesse 300 à 600 tr/min - Speed 300 to 600 rpm

www.micro-mega.com

